




WinCall Nurse

La communication hospitalière facilitée

La contrainte du temps de travail face à l'exigence de la qualité des soins impose des moyens souples et efficaces pour gérer et aménager rapidement l'organisation du personnel de soins dans les établissements de santé.

Le logiciel **WinCall Nurse** représente la solution idéale pour une gestion individuelle et conviviale des transferts d'appels d'urgence et des alarmes techniques ou de sécurité vers le personnel en service dans l'établissement.

La communication hospitalière est optimisée.

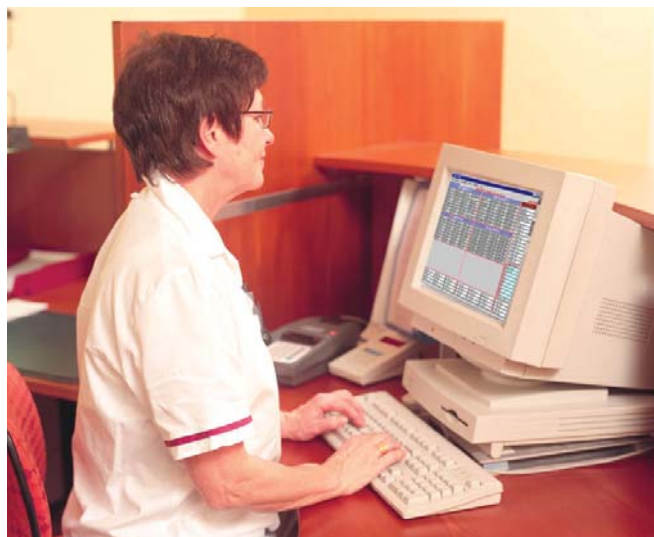

Le logiciel qui répond à toutes les attentes

WinCall Nurse est un logiciel entièrement conçu par Ascom pour le secteur de la santé.

Outil de travail complet, il permet le transfert des appels infirmières **teleCARE** vers les systèmes de communication mobile Ascom intégrant la réception de messages alphanumériques, radiomessagerie **teleCOURIER**, portables émetteur/récepteur **telePROTECT**, téléphones mobiles DECT **Ascom 9d** ou **Office 130** (via PABX Ascotel).



Facilité d'utilisation

La convivialité de **WinCall Nurse** permet son paramétrage et sa personnalisation en toute simplicité par l'utilisateur.

Ce dernier peut l'adapter en fonction de son propre environnement et avoir accès ainsi à la visualisation d'un ou plusieurs services.


L'utilisateur peut effectuer lui-même la programmation des transferts, personnaliser les libellés et définir une organisation jour / nuit propre aux réelles exigences de son établissement. Ainsi, les messages seront adressés vers les bonnes personnes ou groupe de personnes, en fonction du protocole d'intervention établi.

Rapidité et efficacité

Toutes les informations de **WinCall Nurse** sont visibles en un seul coup d'œil sur l'écran.

WinCall Nurse permet de visualiser la totalité d'un service et de son environnement.

Très souple et très ergonomique, le logiciel reçoit, analyse, affiche et traite les événements du système appel infirmières et des interfaces d'alarmes auxquels il est raccordé. Il offre une vue panoramique de l'état de chaque chambre dans les unités de soins (niveaux d'appels d'urgence et présences infirmières) et de chaque alarme.

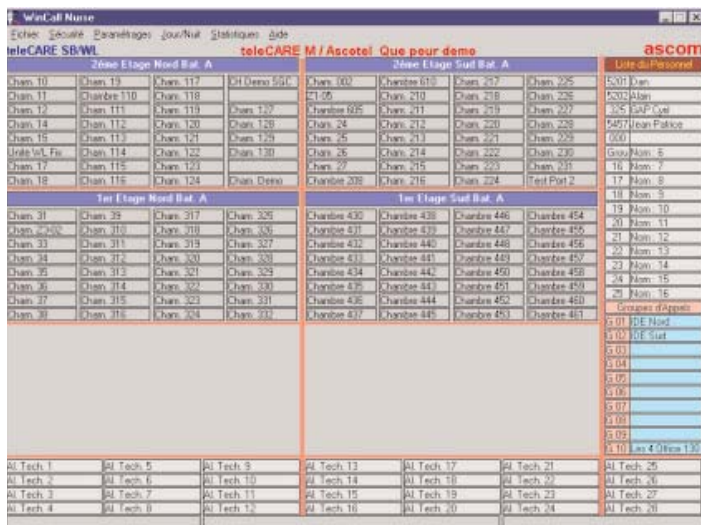

The screenshot displays the WinCall Nurse software interface. It features a main window with a menu bar (Ecran, Sécurité, Paramétrage, Jour/Nuit, Statistiques, Aide) and a title bar (WinCall Nurse). The interface is divided into several sections: 'teleCARE SB/WL', 'teleCARE M / Ascotel', 'Que pour dame', and 'ascotel'. The central part of the screen is a large grid showing room status for various units (e.g., 'Zone Etage Nord Bat. A', 'Zone Etage Sud Bat. A', 'Zone Etage Nord Bat. A', 'Zone Etage Sud Bat. A'). Each cell in the grid contains room numbers and their current status. To the right of the grid is a 'Liste du Personnel' section, which lists staff members and their assigned rooms. At the bottom of the screen, there is a section for 'AI Tech.' (Art Infirmier) with columns for different technicians and their assigned rooms.

Les fonctions et les atouts de WinCall Nurse

Accès au logiciel

4 modes de fonctionnement

- Mode utilisateur
- Mode opérateur (mot de passe)
- Mode paramétrage (mot de passe)
- Mode système (mot de passe)

Personnalisation

- Des messages
- Des transferts
- De la fonction Jour / Nuit

Visualisation sur écran

- Des unités de soins
- Des chambres en appels / présences
- Des alarmes
- De la liste du personnel
- Des groupes d'appels

Réception de messages

- Radiomessagerie - ascotel teleCOURIER
- Téléphonie mobile DECT - Ascotel 9d
- Portable Office 130 (via PABX Ascotel)
- Afficheur de couloir lumineux (jusqu'à 50 adressables)
- Possibilité de désactiver l'envoi d'appel vers les récepteurs et/ou les afficheurs

Fonction statistique : "Recherche"

- Mémorisation et stockage des événements (remplace l'imprimante)
- Enregistrement des changements Jour / Nuit et Marche / Arrêt système
- Recherche, analyse et tri des appels.
- Calcul de la durée d'appel, de la durée des présences

Possibilité d'exploitation des systèmes teleCARE SC, présence, carte teleTRACER RU, (pour les autres systèmes : nous consulter)

Fiabilité et traçabilité

WinCall Nurse est aussi un outil de supervision.

En enregistrant chaque événement, il fournit des informations permettant à l'administrateur de créer des statistiques (heures d'appel, origine de l'appel, heure d'acquit...).

La traçabilité des appels et des acquits constitue à la fois un élément de gestion interne et le constat d'un tiers pour les familles. Les informations sont stockées à l'infini et sont toujours consultables.

Adaptabilité

WinCall Nurse peut se coupler à la plupart des autres systèmes Appels Infirmières existants (nous consulter).

Ascom Nira S.A.

28, avenue de l'Île-Saint-Martin - 92024 Nanterre Cedex
Tél. : 0811 90 20 10 - Fax : 01 47 69 64 52 - E-mail : info@ascomnira.fr - Web : www.ascomnira.fr

Configuration de la console :
Console de type PC uniquement
Pentium III / 350MHz / 128 MoRAM / Windows 9x / NT4 / 2000 Pro
(NT, 2000 conseillé)
Ecran SVGA 1024 x 768 / clavier / souris
Disque dur : 10 Mo disponible
2 Ports COM RS232 disponibles (3 si 2 ports d'entrée utilisés)

